


EMS カッサ

取扱説明書



各部名称

〈表〉

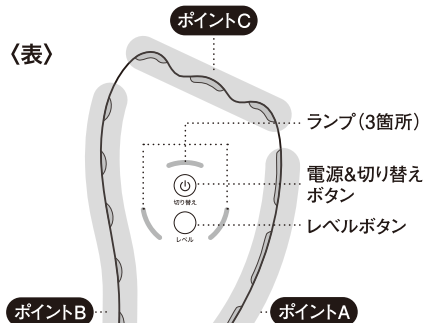

ランプ(3箇所)


電源&切り替え
ボタン

レベルボタン

ポイントB

ポイントA

〈裏〉

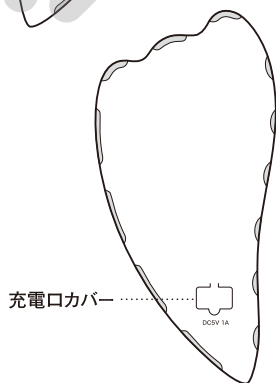

充電口カバー

DC5V 1A

使いかた

【充電方法】

USBケーブルの充電ジャックを本体の充電口に差し込み、USBコネクタをUSB電源アダプタ（別売）またはパソコンやモバイルバッテリーなど、安定した出力5VのUSBポートへ接続してください。充電中はランプが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。
※充電中は本体操作ができません
※満充電までの時間は約2時間です
（充電環境などにより充電時間は前後します）
※電池残量によって充電時間が短くなる場合があります。

【使用方法】

「電源&切り替えボタン」を押して電源をONにし、お好みのEMSの強さでヘッドをお肌にあて、すべらせるようにしてお使いください。
※初めてご使用される方は、慣れるまでEMSの強さを弱に設定してご使用ください。
※すべりが悪いと感じた場合は、クリームやジェルなどで使用箇所をたっぷり保湿してからご使用ください。

電源&切り替えボタン操作

- ①「電源&切り替えボタン」を1回押す。
電源がONになり、ポイントAがレベル弱でスタートします。
- ②上記①の状態で「電源&切り替えボタン」を1回押す。
ポイントBに切り替わります。
- ③上記②の状態で「電源&切り替えボタン」を1回押す。
ポイントCに切り替わります。
- ④上記③の状態で「電源&切り替えボタン」を1回押す。
電源がOFFになります。

ポイントA・B・CのどこにEMSが流れているかは、ランプで確認してください。

レベルボタン操作

「レベルボタン」を押すごとにEMSの強さが切り替わります。

→弱(ランプ点灯)→中(ランプ点滅遅)→強(ランプ点滅早)

使用上の注意

- 1日に1度の使用が目安です。過度な使用はかえってお肌に負担をかけるので、お肌の状態を見ながら使用頻度や使用時間を調整してください。
- 本製品を使うときは、手を拭いてからご使用ください。
- 同じ場所に長くどめず、軽く動かしながらご使用ください。
- 強く押しつけてこするのではなく、お肌の上をすべらせるようにしてお使いください。
- カッサによる跡や赤み(カッサ痕)が残っている箇所は、消えてからケアをしてください。
- EMS(微弱電流)の感じ方には個人差があります。

自動OFFタイマー付き。
作動後約10分で自動停止します。

お手入れ方法

使用後はやわらかい布やティッシュなどでふき取り、清潔に保管してください。
※水洗いはしないでください。
※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

故障かな?と思ったら

症 状	確認していただくこと
使用中に電源が切れる	10分以上経過していませんか？ 最後に操作を行ってから10分経過すると、自動的にOFFになります。
EMSの体感が弱くなった	電池残量が少なくなっていないですか？ 充電してください。

使用電池について

- ・充電式電池はリチウムイオン電池を使用しています。
- ・充電式電池は消耗品です。充電を繰り返すと使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・電池の特性上、初めてお使いの時や長期間使わなかった時は電池の性能が低下している場合がございます。長期間使用しない場合は電池が劣化しますので、2ヶ月に一度はフル充電してください。
- ・周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、充電効率が悪く充電できない場合があります。また、バッテリーが劣化する原因にもなります。
- ・充電電池の寿命は使用状況、保管方法などの状態により大きく変化します。
- ・製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

本製品の使用電池

【名 称】リチウムイオン (Li-ion) 電池
【公称電圧】DC3.7V



仕 様

電源方式：充電式

電 源：DC5V 1A

サ イ ズ：本体 約高さ138×幅66×奥行18 (mm)

重 量：本体 約50g

素 材：ABS樹脂/メッキ

セット内容：本体/充電ケーブル/取扱説明書

本書は商品到着日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせて頂くことをお約束するものです。修理・交換に際しましては事前にご購入元までご連絡をお願いします。詳細は下記保証規定をご参照ください。

保証規定

- 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、ご購入から一年以内は無料で修理・交換いたします。
- 修理ご依頼品の送料および諸経費はお客様の負担になります。※ご発送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れてください。
- 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って修理させていただきます。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - イ、ご購入後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
 - ロ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ハ、使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
 - ニ、火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
 - ホ、落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
 - ヘ、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - ト、一般家庭以外（たとえば業務用等）に使用された場合の故障および損傷
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

発売元



株式会社ヴァルテックス
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-11-2 1F
03-6381-6336

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

給表示の例	⓪ この給表示は絶対してはいけい内容です ❗ この給表示は必ず守るべき内容です
-------	--

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

＜免責事項について＞

- 地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 外観、仕様は商品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

⚠ 危険

- ⓪ 下記のような医療用電子機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないでください。また近くで絶対に使用しないでください。
 - ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動を招くおそれがあります。

- ⓪ ・高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所、湿気の多い場所での使用や放置はしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

⚠ 警告

- ⓪ 取扱説明書上にある使用方法以外では、絶対に使用しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ⓪ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

- ❗ 絶対に改造、分解、修理しないでください。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

- ❗ 次のような疾患のある方は医師と相談の上ご使用ください。
 - ・心臓疾患 ・有熱性疾患 ・急性疾患 ・感染症疾患
 - ・血圧異常 ・血友病疾患 ・悪性腫瘍 ・てんかん
 - ・糖尿病 ・結核性疾患、伝染性疾患、急性疾患（疼痛性）
 - ・レーシック手術を受けた方 ・骨粗しょう症の方
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

事故やトラブルの原因になります。

- ❗ 次のような方は使用しないでください。
 - ・使用部位に神経障害、皮膚知覚障害のある方
 - ・骨折、整形手術などで使用部位にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
 - ・使用部位に交通事故などによる後遺症がある方
 - ・小児や成長期の子供、およびご自身で意思表示の出来ない方

事故やトラブルの原因になります。

- ❗ 次のような方は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方、金属アレルギーのある方
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
 - ・敏感肌の方
 - ・皮膚感覚の弱い方

肌や身体のトラブルの原因になります。

・妊娠中、授乳中、生理中、出産前後の方

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

- ❗ 次のような場合や部位には使用しないでください。
 - ・体調がすぐれない時や発熱時
 - ・飲酒後や薬を服用した時や疲労が激しい時
 - ・けがや傷、痛み、湿しん、はれもの、にきび、化膿性疾患のある場合およびその部位
 - ・眼球やまぶた、およびのどとけ
 - ・当日、脱毛処理をした部位
 - ・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合およびその部位
 - ・整形手術をした部位

肌や身体のトラブルの原因になります。

- ❗ ・乳幼児、子供の手の届くところでは絶対に使用しないでください。また置かないでください。
- ・使用中、肌や体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・必ず痛くないレベルで使用してください。強すぎると接触部にトラブルを起こすおそれがあります。
- ・使いはじめや敏感肌の方は、必ずお肌の様子をみながら使用してください。

肌や身体のトラブルの原因になります。

⚠ 注意

- ⓪ 長時間同じ箇所へヘッドをあて続けしないでください。

皮膚にトラブルを起こしたり、痛みを感じるおそれがあります。

- ⓪ 他の機器との併用は、絶対にしないでください。

事故やけがのおそれがあります。

- ⓪ 本体は絶対に濡らさないでください。

感電やショート、発火の原因となります。

- ⓪ 眠りながら使用しないでください。

- ⓪ 運転しながら使用しないでください。

思わぬ事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

- ⓪ 本体を落としたりぶつけたりして破損したら、絶対に使用しないでください。

けがのおそれがあります。

- ⓪ 本製品は一般家庭用なので、業務用として使わないでください。

事故やトラブルの原因になります。

- ❗ 使用するときは必ず、電源スイッチなど各機能が正常に作動することを確認してから使用してください。

事故やけがのおそれがあります。

- ❗ 本製品に水や他の液体をかけたり浸したりしないでください。風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしないでください。

- ❗ 水洗いしないでください。使用後はやわらかい布かティッシュなどで拭きとり、清潔に保管してください。

内部に水が入り、故障や火災、感電のおそれがあります。

- ❗ 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱している等異常が起きたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。

火災などの原因となります。

- ❗ 直射日光のあたる場所、高温多湿な環境での使用や保管は絶対にしないでください。

故障や劣化のおそれがあります。

- ❗ つけまつげ、まつげエクステをしている場合は、本製品が触れないようご注意ください。

つけまつげ、まつげエクステの破損や皮膚を傷ついたり炎症などのおそれがあります。

- ❗ カッサによる跡や赤み（カッサ痕）が残っている箇所は、消えてからケアをしてください。

肌や身体のトラブルの原因になります。